

Betjening af SC-ISEE180


- 1 Indstil strop så masken sidder behageligt uden at stramme for meget.
- 2 Indstil ISEE180 til den massage kombination og tid du ønsker.
- 3 Tag masken på og sæt dig i lænestol eller endnu bedre læg dig ned.
- 4 Tag masken af når massagen stopper og hvil med lukkede øjne i et par minutter inden du rejser dig.
- 5 Husk at rengøre masken efter brug med en fugtig klud skyllet i vand med lidt opvaskemiddel.
- 6 Undlad at bruge andre syntetiske rengøringsmidler der kan forurene huden.
- 7 Hvis du bruger kontaktlinser, anbefales det at tage dem ud inden massage.

Kontrolpanel SC-ISEE180

Auto programmer:

1. tryk = Skiftende vibrations styrker
2. tryk = Kraftige vibrationer
3. tryk = Middel vibrationer
4. tryk = Svage vibrationer
5. tryk = Lange pulserende vibrationer
6. tryk = Korte pulserende vibrationer
8. tryk = Svag impuls vibrationer
8. tryk = Middel impuls vibrationer
9. tryk = Hurtig impuls vibrationer

Massagemaske

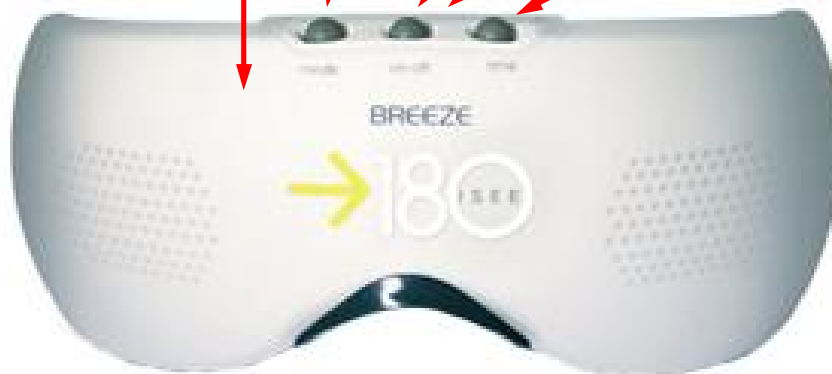

Start Auto programmer med musik

Start Tryk én gang.
Stop Hold knap nede

Musik:

1. tryk = Naturlyd regn, dråber
2. tryk = Naturlyd fårekylinger
3. tryk = Naturlyd bæk α hjerne bølger
4. tryk = Naturlyd bølger

Timer:

1. tryk = 3 minutter
2. tryk = 5 minutter
3. tryk = 20 minutter

HUSKI!

Hvil et par minutter med lukkede øjne inden du rejser dig

Drik rigeligt med rent vand efter massagen